

compartiendo la
misma meta.



AWD 655

Lavadora termodesinfectadora para la
desinfección de instrumental médico



AWD 655: lavadora AT-OS para la termodesinfección de instrumental médico

La termodesinfectadora AT-OS para el lavado y termodesinfección de instrumental médico ha sido diseñada cumpliendo los más altos estándares europeos vigentes para termodesinfectadoras: EN-ISO 15883. Sus reducidas dimensiones y su alta tecnología la convierten en la máquina ideal para el lavado y la termodesinfección de instrumental médico.

AT-OS AWD 655

Capacidad de carga (bandejas DIN)	10
Puerta única de cristal con luz interior: Mod AWD655	1
Doble puerta comunicada de cristal con luz interior: AWD655D	2
Niveles de lavado con brazo aspersor	2 - 5
Dosificadores de aditivo líquido	2 - 5
Compartimento de aditivo líquido: capacidad para botellas de 5L	4
Pre-calentador de agua para ciclo rápido	1
SalidaUSB/impresora para datos o escáner de código de barras	•
Sistema de secado con filtro HEPA H14	•
Descalcificador de agua integrado	•
Control volumétrico de aditivos químicos (medidor de flujo)	•




► Dimensiones (AnchoxFondoXAlto mm) 650x700x1800



Concepto de desinfección avanzado

- El usuario puede establecer la calidad del lavado a través de la conductibilidad del agua
- Monitorización de los brazos aspersores para asegurarse que no están bloqueados
- Continuo control de la presión de agua y demás parámetros de lavado para la realización de un ciclo de temodesinfección satisfactorio

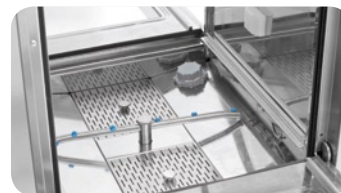


Reconocimiento automático de carros de lavado

El aparato reconoce qué tipo de carro se ha introducido y comienza de forma automática el correspondiente programa, eliminando así la posibilidad de error por parte del usuario.



Doble pantalla para el control del proceso de lavado

- Pantalla gráfica para control de todos los parámetros del ciclo
- el modelo de puertas comunicadas posee pantalla de visualización del proceso en ambos lados

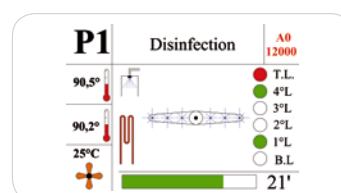

Compartimento del detergente

- Control visual de niveles de detergente (ventana)
- Puerta con cerradura para restricción del personal no autorizado
- Bandeja extraíble de gran capacidad para una limpieza más fácil
- Capacidad para 4 recipientes de 5L



Sistema híbrido de calentador: vapor-eléctrico

Ahorro de consumo de energía mediante calentamiento del agua al vapor a 95° C para una adecuada temodesinfección. El calentador eléctrico se activa automáticamente en caso de fallo de suministro de la red de vapor.





AT-OS Srl

Viale del Lavoro, 19 - 37030 Colognola ai Colli - Verona - ITALY

Tel (+39) 045 6159411 - Fax (+39) 045 6159422

info@at-os.com | www.at-os.com

